



LabUReader Plus 2

Digitales Labor
DocUReader 2 PRO
LabUReader Plus 2
UriSed mini
MICRONAUT

10-fach-Harnteststreifenleser

LabUReader Plus 2



Der LabUReader Plus 2 ist ein halbautomatisches Auswertegerät für Urinteststreifen mit kontinuierlicher Streifenzufuhr (bis zu 10 Streifen max. Ladevolumen) für Anwender mit mittlerem bis hohem Probendurchsatz.

Das System bietet eine optimierte, mehrstufige Benutzerverwaltung und ist einfach an eine Praxis- bzw. Labor-Software anbindbar (Schnittstellenprotokoll HL7 konvertierbar z.B. zu GDT/LDT).

MADE IN EUROPE

Technische Spezifikationen

Messprinzip	Reflektionsphotometer (505, 530, 620, 660 nm)
Probedurchsatz	Bis zu 500 Tests/Stunde
Display	5,7" LCD VGA Touchscreen
Drucker	Integrierter Thermodrucker
Barcode Scanner	optional über USB anschliessbar
Schnittstellen	Serial RS232, USB Typ B, USB Typ A, PS2 (externe Tastatur, Barcodeleser), Ethernet
EDV Protokolle	LIS2 (ASTM+), HL7
Betriebsumgebung	15-32°C; 20-85% Luftfeuchtigkeit; 70 kPa bis 106 kPa
Stromversorgung	12 V / 5A ; Aufnahme 60 W
Gewicht	7 kg
Maße	300 x 300 x 180 mm (BxTxH)

U11Plus-Teststreifen

Hochqualitative Teststreifen, made in Germany, günstig und akkurat.



	U11Plus
Packungsgröße	150 Teststreifen wiederverschließbare Box
Haltbarkeit	24 Monate ab Produktion
Ablesbarkeit	Visuell oder mit DocUReader 2 PRO oder LabUReader Plus 2
Parameter	Bilirubin, Urobilinogen, Ketonkörper, Ascorbinsäure, Glucose, Protein, Blut, pH-Wert, Nitrit, Leukozyten, spezifisches Gewicht
Qualitätskontrolle	z.B. Kova Liqua-TroI™, Quantimetrix



20230915_PK VIII.4.9



Urinanalytik, einfach und effizient

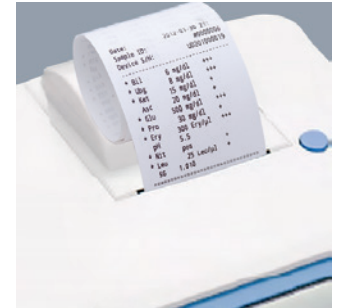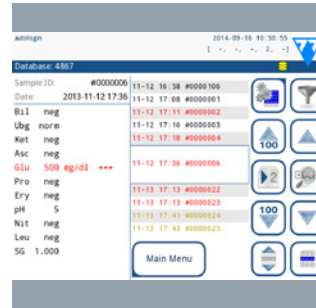

Anwenderorientiert

- Kompaktes Tischgerät
- Intuitive Bedienung mit/über Touchscreen
- Leicht zu reinigen
- Kosteneffizientes Verbrauchsmaterial (150er Streifen-Packungen)

Funktionell

- Erfüllt die Ansprüche an ein modernes POCT-System
- Programmierbares Anwender-Management
- Umfassende QC-Funktionen, RiliBÄK-konformes Arbeiten ohne Probleme

Fortschrittlich

- Erweiterte, patentierte Detektionsmethode der Streifen
- Automatischer Start der Messungen
- Intelligentes Datenmanagement
- System-Upgrades per USB-Stick

Bestellinformationen

Artikel	Bestellnr.	VE
LabUReader Plus 2	MD5087	1 Stk.
DocUReader 2 PRO	MD5080	1 Stk.
U11 Plus-Harnfeststreifen	MD5075	150 Stk.
Kova Liqua-Trol™	MD5079	2 x 15 ml
Urinbecher mit Deckel (125ml)	MD6000	500 Stk.
Dip-M	MD2464	300 Stk.
Desinfektionstücher Meliseptol®	MD39014	60 Tücher
Registrierrolle (57 x 45 mm)	189000600	10 Stk.
Barcode Reader	MD5000910	1 Stk.
Labelprinter ZD411 für Windows	MD5000955	1 Stk.
Labelprinter ZD411 für macOS	MD5000957	1 Stk.
Label-Etiketten Zebra ZD410 / ZD411	MD5000956	1 x 2580 Stk.

Digitales Labor

Der **LabUReader Plus 2** oder alternativ das kleinere Gerät **DocUReader 2 PRO** sind Teil des Konzepts "Digitales Labor" von AUROSAN.

Kombinierbar auch mit dem **MICRONAUT**-System für die Mikrobiologische Diagnostik.

Integrierbar mit dem **UriSed mini** Sedimentautomaten.

Datentransfer an die Praxis-EDV: Die Messergebnisse werden nach der automatischen Auswertung an den PC zur Übernahme in die Patientenakte übertragen. Zusätzlich steht eine Kopie als Ausdruck zur Verfügung.