



Analoge Blutdruckmessgeräte

HEINE Gamma G5
HEINE Gamma G7

Analoge Blutdruckmessgeräte basieren auf dem auskultatorischen Messprinzip nach Riva-Rocci. Sie bestehen aus einer aufblasbaren Manschette, einem Manometer und einem Ballon mit Ventil zur Druckregulierung. Sie werden meist von Fachpersonal verwendet, aufgrund ihrer Zuverlässigkeit, Langlebigkeit und Unabhängigkeit von Strom oder Batterien.

Blutdruckmessgeräte müssen gemäß der **Medizinprodukte-Betreiberverordnung** (MPBetreibV) alle 2 Jahre durch einen zugelassenen Wartungsdienst kontrolliert werden. Gerne können Sie die **Kontrolle Ihres Blutdruckmessgerätes** bei uns durchführen lassen.

HEINE Gamma G5 und G7

Die Gamma Blutdruckmessgeräte von HEINE kombinieren ein funktionelles, modernes Design mit höchster Messpräzision und langer Lebensdauer. Somit sind sie für einen zuverlässigen Dauereinsatz in Kliniken und Praxen bestens geeignet. Das einzigartige Druckmesssystem ermöglicht einen gleichmäßigen Lufteinlass ins Messwerk und erlaubt ein Ablesen der Messergebnisse ohne Überspringen des Zeigers, wie es sonst nur bei Doppelschlauch-Blutdruckmessgeräten zu finden war. Dadurch wird ein schnelles Aufpumpen durch ein besonders großes Ballvolumen ermöglicht. Das fein dosierbare Drehventil erlaubt einen schnellen Luftablass.

Das **Gamma G5** verfügt über ein Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff mit einem stoßabsorbierenden Anti-Rutschbelag. Das Gehäuseoberteil des **Gamma G7** ist mit einer zusätzlichen Aluminiumlegierung mit stoßabsorbierendem Schutzring für Ziffernblatt und Glas versehen und damit noch stabiler.



Eigenschaften:

- Latexfreie Materialien
- Einzigartiges Druckmesssystem
- Überdrucksicheres Manometer
- Stoßfestes Gehäuse
- Zeiger exakt ausbalanciert und stoßresistent
- Großes Ballvolumen
- Gute Ergonomie in Links- und Rechtshänderposition

HEINE Gamma G7 Pakete	Bestellnr.
mit Erwachsenenmanschette Ø 29 - 41 cm	136007119
mit Kindermanschette Ø 13 - 20 cm	136007120
mit - Erwachsenenmanschette Ø 29 - 41 cm - Erwachsenenmanschette Ø 20 - 29 cm - Kindermanschette Ø 13 - 20 cm	136007121
Zubehör	
Kindermanschette Ø 13 - 20 cm	136007122
Erwachsenenmanschette Ø 20 - 29 cm	136007123
Erwachsenenmanschette Ø 29 - 41 cm	136007124

HEINE Gamma G5 Pakete	Bestellnr.
mit Erwachsenenmanschette Ø 29 - 41 cm	136007117
mit Kindermanschette Ø 13 - 20 cm	136007107
mit - Erwachsenenmanschette Ø 29 - 41 cm - Erwachsenenmanschette Ø 20 - 29 cm - Kindermanschette Ø 13 - 20 cm	136007118
Zubehör	
Säuglingsmanschette Ø 8 - 13 cm	136007108
Kindermanschette Ø 13 - 20 cm	136007122
Erwachsenenmanschette Ø 20 - 29 cm	136007123
Erwachsenenmanschette Ø 29 - 41 cm	136007124

Geräte und Zubehör finden Sie unter
www.aurosan-shop.de





Analoge Blutdruckmessgeräte

boso clinicus I
boso clinicus II

boso clinicus I und II

Die Manometer boso clinicus sind überdrucksicher und verfügen über ein stoßfestes Gehäuse. Sie eignen sich daher ideal für einen harten Praxis- und Klinikalltag. Ihre leichte Handelbarkeit und ihr korrosionsfreies Präzisionsmesswerk verhindern Beschädigungen auch bei starken Stößen. Sie sind in Einschlauch- und Zweischlauch-Technik verfügbar.

Die Einschlauch-Lösung des **boso clinicus I** ermöglicht einen schnellen Manschettenwechsel und zeichnet sich durch ein einfaches Handling aus.

Aufgrund der Zweischlauch-Technik des **boso clinicus II** kann der Manschettendruck ohne das Schwingen des Zeigers und somit noch genauer abgelesen werden.



boso clinicus I Pakete	Bestellnr.
mit Erwachsenenmanschette Ø 33-41 cm	333007000
mit Kindermanschette Ø 14-21 cm	333007200
Zubehör	
Kindermanschette Ø 14-21 cm	333009850
Kleinkindmanschette Ø 8-13 cm	333009500
Manschette Ø 22-32 cm	333008200

Passend dazu	Bestellnr.
HEINE Gamma 3.2 Stethoskop Erwachsene	136007109
HEINE Gamma 3.3 Stethoskop Kinder	136007110

boso clinicus II Pakete	Bestellnr.
mit Erwachsenenmanschette Ø 33-41 cm	333007500
mit Kindermanschette Ø 14-21 cm	333007600
Zubehör	
Kleinkindmanschette Ø 8-13 cm	333009550
Kindermanschette Ø 14-21 cm	333009750
Manschette Ø 22-32 cm	333008400
Manschette Ø 33-41 cm	333008300
Manschette Ø ab 41 cm	333008150

Geräte und Zubehör
finden Sie unter
www.aurosan-shop.de



Digitale Blutdruckmessgeräte

boso medicus
boso medicus prestige S

Digitale Blutdruckmessgeräte sind elektronische, benutzerfreundliche Geräte, die den Blutdruck vollautomatisch messen. Sie basieren auf dem oszillometrischen Messprinzip.

Blutdruckmessgeräte müssen gemäß der **Medizinprodukte-Betreiberverordnung** (MPBetreibV) alle 2 Jahre durch einen zugelassenen Wartungsdienst kontrolliert werden. Gerne können Sie die **Kontrolle Ihres Blutdruckmessgerätes** bei uns durchführen lassen.

boso medicus

Das boso medicus ist ein digitales Blutdruckmessgerät zur Selbstmessung am Oberarm und überzeugt durch seine einfache Handhabung, Präzision und Komfort. Die Messung erfolgt vollautomatisch und liefert präzise Werte über Blutdruck und Pulsfrequenz. Die Bedienung erfolgt einfach über nur einen Knopfdruck. Die Ergebnisse werden übersichtlich auf einem großen Display angezeigt. Die Aufpumphöhe kann individuell eingestellt werden und sorgt für zusätzlichen Komfort. Es ist zudem batterieschonend aufgrund der automatischen Abschaltautomatik.



boso medicus Paket	Bestellnr.
mit Zugbügelmanschette Ø 22-32 cm	333001400
Zubehör	
Manschette CA01 Ø 22-32 cm, Schlauch 100 cm	333002250
Manschette CA01 Ø 22-32 cm, Schlauch 60 cm	333001600
Manschette CA02 Ø 32-48 cm	333001450



boso medicus prestige S

Das boso medicus prestige S ist ein oszillometrisches Messgerät mit einem extra großen Display und bietet mit seinem klaren Design eine optimale Übersicht über die Messergebnisse. Die Aufpumpautomatik erhöht den Komfort während der Messung, die sehr sanft und ohne Nachpumpen funktioniert. Das intelligente System verfügt über eine Mittelwertfunktion zur Beurteilung des Blutdrucks und kann vorliegende Herzrhythmusstörungen erkennen und anzeigen. Der integrierte Speicher kann 90 Messwerte aufnehmen und zur Nutzung eines Langzeitprofils verwendet werden.



boso medicus prestige S Pakete	Bestellnr.
mit Zugbügelmanschette Ø 22-42 cm	333001000
mit XL-Manschette Ø 32-48 cm	333001100
mit XS-Manschette Ø 16-22 cm	333001200
Zubehör	
Manschette CA01 Ø 22-32 cm, Schlauch 60 cm	333001600
Manschette CA02 Ø 32-48 cm	333001700
Manschette CA03 Ø 16-22 cm	333001800
Manschette CA04 Ø 22-42 cm	333001590

Geräte und Zubehör
finden Sie unter
www.aurosan-shop.de





Digitale Blutdruckmessgeräte

boso medicus smart
Connex ProBP 3400

boso medicus smart

Dieses Gerät misst halbautomatisch, dabei ermöglicht die sog. Memomatic ein optimiertes Aufpumpen. Aufgrund der kompakten Größe ist es ideal auf Reisen oder als Zweitgerät, so dass Sie hier nicht auf die Sicherheit der Oberarmmessung verzichten müssen. Dank der integrierten Arrhythmie-Erkennung können Herzrhythmusstörungen frühzeitig erkannt werden.

boso medicus smart Pakete	Bestellnr.
mit Standard Manschette Ø 22-32 cm	333002000
mit XL-Manschette Ø 32-48 cm	333002100

boso medicus X

Das boso medicus X ist ein vollautomatisches Oberarm-Blutdruckmessgerät mit klinisch validierter Messgenauigkeit und einfacher Bedienung über eine Start-Stop-Taste. Die intelligente Aufpumpautomatik erlaubt eine komfortablere Messung ohne Aufpumpen. Herzrhythmusstörungen können erkannt und die Ergebnisse nach WHO-Richtlinien bewertet werden. Eine Mittelwertfunktion unterstützt die Beurteilung des Blutdrucks, und bis zu 30 Messungen lassen sich für ein 14-Tage-Profil speichern.

boso medicus X Pakete	Bestellnr.
mit Standard Manschette Ø 22-32 cm	333002400
mit XL-Manschette Ø 32-48 cm	333002500

Connex ProBP 3400

Das Connex ProBP eignet sich durch sein kleines handliches Format und eine lange Akku-Dauer auch für eine mobile Nutzung. Es ist konfigurierbar und lässt sich an Ihre Arbeitsabläufe und individuelle Patientenbedürfnisse anpassen. Die SureBP NIBP Technologie ermöglicht schnelle und genaue Messungen auch bei Bewegung oder schwachem Puls.

Connex ProBP 3400 Pakete	Bestellnr.
mit FlexiPort Manschette Ø 25-34 cm u. FlexiPort Manschette Ø 32-43 cm	745000300
Zubehör	
Tischhalterung mit Korb	745000310
FlexiPort Manschette Ø 12-16 cm (8)	274010008
FlexiPort Manschette Ø 15-21 cm (9)	274010009
FlexiPort Manschette Ø 20-26 cm (10)	274010010



Zubehör	Bestellnr.
Standard Manschette Ø 22-32 cm	333002200
XL-Manschette Ø 32-48 cm	333002300



Zubehör	Bestellnr.
Standard Manschette Ø 22-32 cm	333002200
XL-Manschette Ø 32-48 cm	333002300
Netzgerät für boso dig. Blutdruckmessgeräte	333001500



Zubehör	Bestellnr.
FlexiPort Manschette Ø 25-34 cm (11)	274010011
FlexiPort Manschette Ø 25-34 cm (11L)	274010011L
FlexiPort Manschette Ø 32-43 cm (12)	274010012
FlexiPort Manschette Ø 32-43 cm (12L)	274010012L
FlexiPort Manschette Ø 40-55 cm (13)	274010013
FlexiPort Manschetten Multipack Gr. (6, 7,) 8, 9, 10, 11, 12, 13	274010014



Langzeit- Blutdruckmessgeräte

Tonoport VI
boso TM-2450

Langzeit-Blutdruckmessgeräte dienen der kontinuierlichen Erfassung des Blutdrucks über 24 Stunden. Der Blutdruck wird in regelmäßigen Abständen gemessen und gespeichert, wodurch eine Beurteilung des Blutdruckverlaufs im Alltag ermöglicht wird. Diese Beurteilung dient der Erkennung von Schwankungen des Blutdrucks über den Tag, sowie Kontrolle und Anpassung medikamentöser Behandlungen von Hypertonie.

Blutdruckmessgeräte müssen gemäß der **Medizinprodukte-Betreiberverordnung** (MPBetreibV) alle 2 Jahre durch einen zugelassenen Wartungsdienst kontrolliert werden. Gerne können Sie die **Kontrolle Ihres Blutdruckmessgerätes** bei uns durchführen lassen.

Tonoport VI

Das Tonoport VI von GE Healthcare ist ein modernes, benutzerfreundliches Langzeitblutdruckmessgerät. Durch die intuitiven Programmierfunktionen können Messungen in festgelegten Intervallen oder zufällig durchgeführt, sowie individuelle Einstellungen für Tag und Nacht gewählt werden. Das Aufpumpen der Manschette erfolgt schnell mit geringen Maximaldrücken und ist somit unauffällig im Alltag. Das Tonoport VI ist wahlweise auch mit der CardioSoft Software erhältlich, die weitere Auswertemöglichkeiten bietet.

Tonoport VI	Bestellnr.
ohne CardioSoft	344001101
mit CardioSoft DFT	344001100

Zubehör	
Tragetasche inkl. Schultergurt	344001104
Gürtel / Bauchgurt für Tragetasche	344001105



Zubehör	Bestellnr.
Erwachsenenmanschette Ø 17-26 cm	344001106
Erwachsenenmanschette Ø 24-32 cm	344001107
Erwachsenenmanschette Ø 32-42 cm	344001108
Erwachsenenmanschette Ø 38-46 cm	344001109

boso TM-2450

Das boso TM-2450 ist ein leistungsstarkes 24-Stunden-Blutdruckmessgerät, das sich ideal für die ambulante Blutdrucküberwachung eignet. Es bietet eine schnelle und einfache Programmierung über den PC, speichert bis zu 600 Messwerte und ermöglicht eine präzise Arrhythmie-Erkennung. Die Messung erfolgt geräuscharm während des Aufpump- und Ablassvorgangs. Das geringe Gewicht und die ergonomische Hüfttasche sorgen für einen hohen Tragekomfort.

Zusätzlich verfügt das boso TM-2450 über die cBP-Software, die eine Messung des zentralen Blutdrucks ermöglicht. Der zentrale Blutdruck liegt in der Aorta vor und nimmt direkten Einfluss auf die Organe. Dadurch besitzt er eine höhere Aussagekraft gegenüber dem peripheren Blutdruck und ist somit ein Parameter, dessen Einbindung in Untersuchungen empfehlenswert ist.



boso TM-2450 Pakete	Bestellnr.
ohne cBP-Software	333004000
mit cBP-Software	333004100

Zubehör	
Hüfttasche mit Schultergurt	333004300
Upgrade cBP	333004200
Manschette Ø 15-22 cm	333004500
Manschette Ø 20-31 cm	333004400
Manschette Ø 36-50 cm	333004600





ABI-Messgeräte

boso ABI-System 100
boso ABI-System 100 + PWV

ABI-Systeme dienen der Bestimmung des Knöchel-Arm-Index (ABI, Ankle-Brachial Index), welcher sich durch die simultane Messung an allen vier Extremitäten errechnet. Der ABI-Index ist ein wichtiger Indikator für Durchblutungsstörungen, insbesondere der peripheren arteriellen Verschlusskrankheit (pAVK) und dient der frühzeitigen Erkennung von Gefäßverengungen.


Blutdruckmessgeräte müssen gemäß der **Medizinprodukte-Betreiberverordnung** (MPBetreibV) alle 2 Jahre durch einen zugelassenen Wartungsdienst kontrolliert werden. Gerne können Sie die **Kontrolle Ihres Blutdruckmessgerätes** bei uns durchführen lassen.

boso ABI-System 100 & ABI-System 100 + PWV

Der Knöchel-Arm-Index (ABI) besitzt die größte Aussagekraft zur Vorhersage von Herzinfarkt, Schlaganfall und Mortalität. Durch das boso ABI-system wird dieser entscheidende Wert einfach, schnell und präzise ermittelt, so dass die Untersuchung als Routine-Check bei jedem Patienten durchgeführt werden kann.

Die Blutdruckmessung erfolgt zeitgleich oszillometrisch an allen vier Extremitäten. Die reine Messzeit beträgt lediglich eine Minute. Mit der Software boso profil-manager XD können Sie in Sekundenschnelle die Diagnose erstellen, die direkt dem Patienten zugeordnet wird. Dank der GDT-Schnittstelle können die Daten direkt in die Praxis-EDV übertragen werden.

Das Gerät kann außerdem mit der zusätzlichen Ermittlung der Pulswellengeschwindigkeit (PWV) erworben werden. Dadurch kann eine arterielle Gefäßsteifigkeit diagnostiziert werden, die durch fortschreitende Arteriosklerose zunimmt und die Pulswellengeschwindigkeit erhöht.

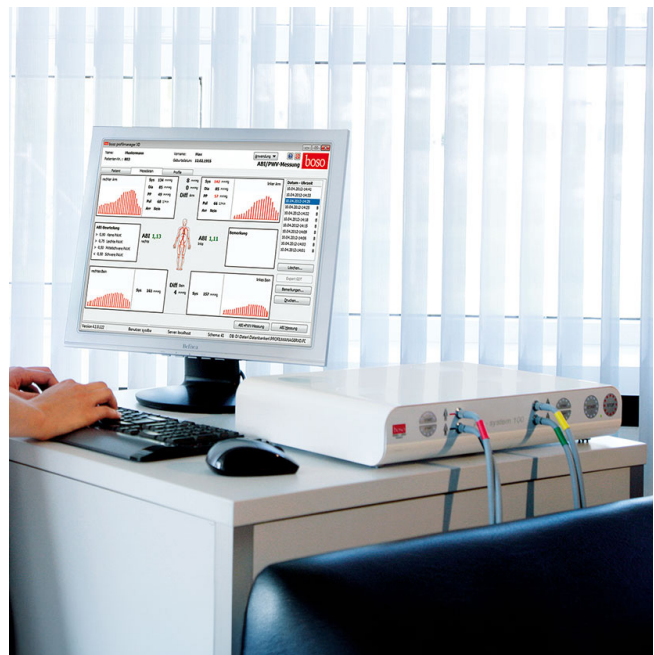

boso ABI-System 100 Pakete	Bestellnr.
mit 2x Nylon-Beinmanschetten inkl. Schlauch Ø 18-38 cm CD boso profil-manager XD USB-Kabel, Netzgerät	333003000
mit PWV 2 x Nylon-Armmanschetten inkl. Schlauch Ø 22-42 cm 2x Nylon-Beinmanschetten inkl. Schlauch Ø 18-38 cm CD boso profil-manager XD USB-Kabel, Netzgerät	333003100

Zubehör	Bestellnr.
Manschette Arm Ø 22-42 cm	333003200
Manschette Bein Ø 18-38 cm	333003300
ABI Schlauchverbindung 2,0 m, Oberarm rechts (rot)	333003400
ABI Schlauchverbindung 2,0 m, Oberarm links (gelb)	333003500
ABI Schlauchverbindung 3,5 m, Bein rechts (schwarz)	333003600
ABI Schlauchverbindung 3,5 m, Bein links (grün)	333003700
Netzteil 5V/2700mA	333003800



Geräte und Zubehör
finden Sie unter
www.aurosan-shop.de

