



SIUI Apogee C1 Expert


Das SIUI Apogee C1 ist ein mobiles Farb-Doppler-Ultraschallsystem mit viel KI-Unterstützung und benutzerfreundlichem Design - der neue Standard in der unteren Preisklasse mobiler Geräte. Mit seiner neuen 2026er Soft- und Hardware hebt er sich deutlich vom Wettbewerb ab, bei gleichem Preis.

Das neigbare 15,6-Zoll LCD-Display bietet eine klare und deutliche Anzeige. Mit seinem geringen Gewicht von nur ca. 6,5 kg inklusive Akku ist das C1 leicht und portabel. Für unterschiedliche Untersuchungsanforderungen stehen jeweils eine Konvex-, Linear-, Phased-Array und Endokavitärsonde zur Verfügung. Häufiger Portwechsel entfällt.

SIUI stellt auch für dieses preisgünstige Ultraschallgerät die Bildoptimierungssoftware MedCore zur Verfügung. Von den verfügbaren AI-Modulen sind zwei nach Wahl bereits im Preis inklusive.

Technische Spezifikationen

- Monitor: 15,6" hochauflösend, neigbar (bis 30°)
- 3 Sondenanschlüsse, 500 GB SSD
- Frequenzen bis 16 MHz
- Beleuchtetes Bedienfeld
- Modi- und Bildoptimierung: Harmonic Imaging (THI, MFI), X-Beam (Compound Imaging), Nanoview (Speckle-Reduktion), Auto Fit (automatische Bildoptimierung), Trapez- & Panoramabildgebung, Duplex / Triplex, Freehand 3D, Farbdoppler (CFM, PDI, DPDI, VS Flow), PW/CW Doppler
- KI-Module: Auto IMT (Gefäßwanddicke), Auto Volume, Auto Flow, Auto EF, Auto OB, Auto Thyroid, Strain-Elastographie (Gewebesteifigkeit)
- Zusatz-Module: Nadelvisualisierung, Mikrofluss-Darstellung, TDI (Gewebedoppler), eFAST (Notfallsonografie), Automatische und manuelle Spektrumanalyse, Rohdatenanalyse, Auto FLC und Post-Processing möglich
- Konnektivität: HDMI / VGA / S-VIDEO; USB 3.0 / Type-C, Netzwerk, ECG-Port, DICOM
- Gewicht: 6,5 kg mit Akku - Laufzeit bis zu 120 Minuten
- Maße: ca. 380 × 107 × 361 mm

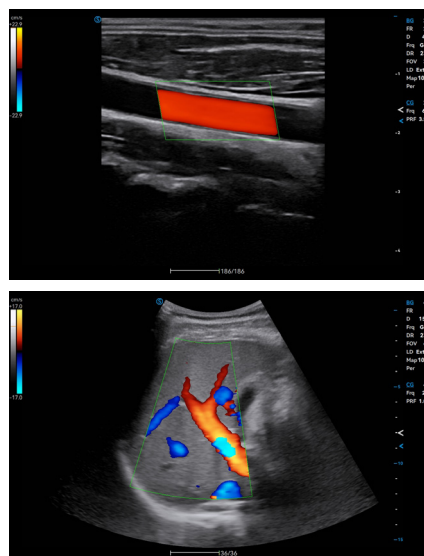

Eine Übersicht passender **Sonden** finden Sie auf der Rückseite.

Zubehör und Verbrauchsmaterial finden Sie unter www.aurosan-shop.de

Eine Gerätevorführung vor Ort oder in einem unserer Sonozentren ist auf Anfrage möglich.





Ultraschall

Ultraschallsonden
Zubehör
SIUI Apogee C1 Expert

Ultraschallsonden SIUI Apogee C1 Expert

	Sonde	Band- breite, FOV	Klinische Anwendungen
	Linear L8LC	3 - 13,5 MHz 38 mm	Schilddrüse, oberflächliche Strukturen, Karotis, Brust, periphere Nerven, periphere Arterien, muskuloskelettal (MSK), Podologie, Hoden, periphere Venen, Small Parts (PEN), Lunge
	Konvex C3LC	1 - 6 MHz 61°	Abdomen, Urologie, Gynäkologie, Schwangerschaft und perinatale Untersuchungen
	Phased-Array P3FC	1,3 - 5 MHz 20 mm / 90°	Transkranieller Ultraschall, orientierende Echokardiographie, Notfallsonographie
	Endokavitär V6LC	2,5 - 13 MHz 157°	Urologie, Gynäkologie / Schwangerenuntersuchung

Zubehör	Bestellnr.
Gerätewagen CR-30 mit manuell-fixer Höheneinstellung	U708550170
Gerätewagen CR-50 mit flexibler Höheneinstellung (Pedal)	U708555230
Fußschalter	U708559010
KI-Modul Auto Thyroid	U708550102
KI-Modul Auto Abdomen	U708550104
KI-Modul Auto OB Plus	U708550106
KI-Modul Auto CA (Carotis)	U708550107
KI-Modul Auto Breast	U708550108



Sonden, Zubehör, Verbrauchsmaterial
und weitere Informationen finden Sie
auch unter www.aurosan-shop.de